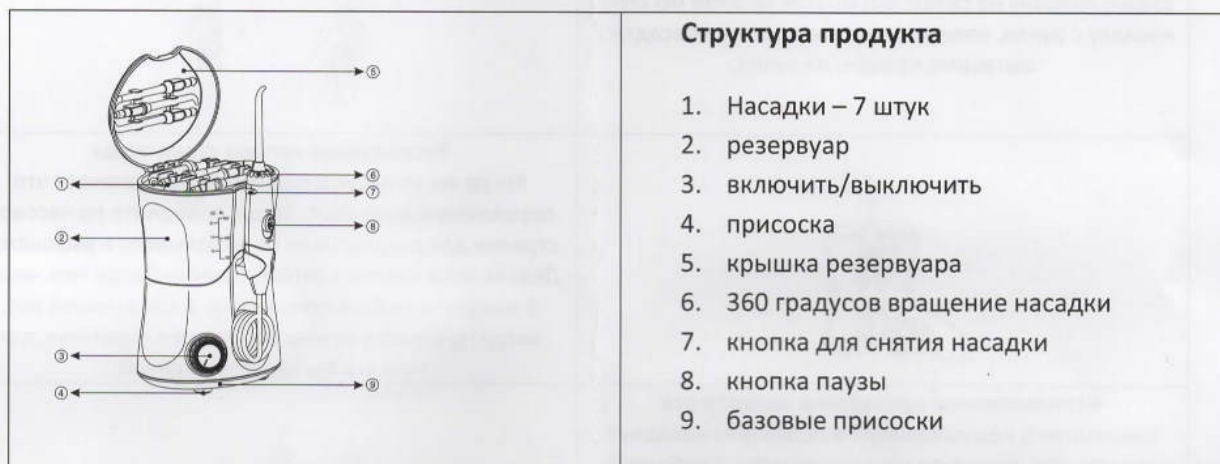


официальный Pecham на Chibis.ua

Инструкция Pecham professional 600 мл.



Разновидность насадок

				
Классическая насадка	Пародонтологическая насадка	Ортодонтическая насадка	Насадка для удаления налета	Ложка для чистки языка

Классическая насадка 3 шт: 3 цветных кольца. Для гигиенических целей.

Рекомендуется использовать 3-мя людьми соответственно (набор для семьи).

4 другие специальные насадки:

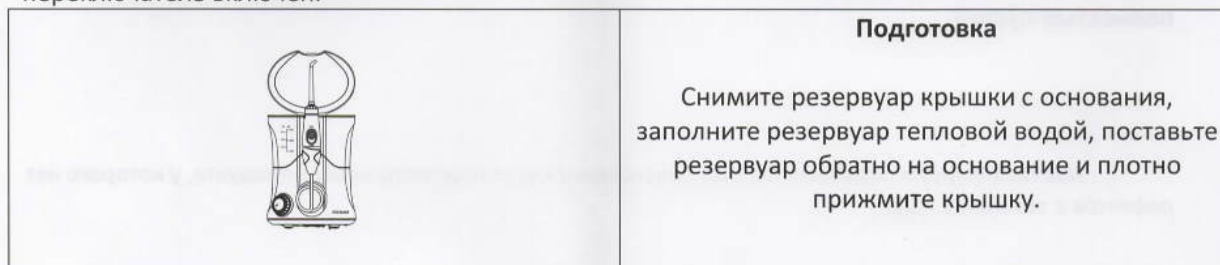
пародонтологическая насадка 1 шт

ортодонтическая насадка 1 шт

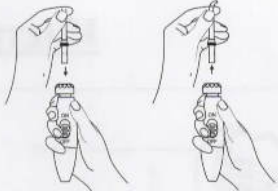
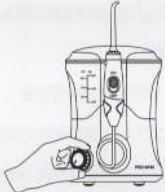

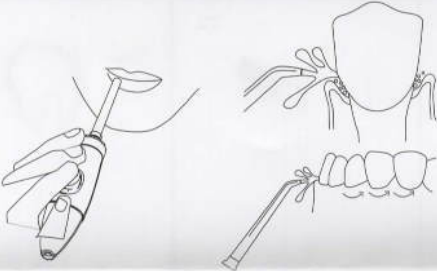

насадка для удаления налета 1 шт

ложка для чистки языка 1 шт

Вставьте в розетку. Если розетка контролируется настенным переключателем, убедитесь, что переключатель включен.



ирригаторы на Chibis.ua

<p>Одеть и снять насадки</p> <p>Вставьте насадку в центр рукоятки, цветное кольцо защелкнется с рукояткой если насадка правильно зафиксирована на своем месте. Для того что бы снять насадку с ручки, нажмите на кнопку снятия насадки и вытащите насадку из ручки.</p>	
	<p>Регулировка напора струи воды</p> <p>Когда вы услышите «щелчок», это означает что переключатель открыт. Затем поверните по часовой стрелке для регулировки от небольшого к высокому. Девайс остановиться автоматически более чем через 3 минуты в любом положении. В следующий раз, когда начинаете нужно вернуться к «щелчку» для того что бы заработал девайс.</p>
<p>Использование ирригатора полости рта</p> <p>Наклонитесь над раковиной и поместите насадку в полость рта. Нацельте насадку на зубы. Свободной рукой включите/выключите прибор. Установите давление воды на необходимый уровень. Направьте поток воды поворачивая насадку на ручке.</p>	
	<p>Рекомендуемая техника чистки</p> <p>Направьте струю воды под углом 90 градусов к линии десны, немного прикройте губы для избежание разбрызгивания, но дайте возможность воде вытекать легко из рта в раковину. Для лучших результатов начните с области моляров (жевательные зубы) перемещаясь в направлении передних зубов. Ведите струю воды вдоль линии десны и останавливайтесь между зубами. Продолжайте данный процесс до тех пор, пока все области вокруг и между зубов не будут очищены.</p>
<p>Пауза</p> <p>Вы можете временно остановить поток воды в любое время опустив вниз кнопку на ручке.</p> <p>Когда закончили чистку зубов</p> <p>Выключите девайс, вылейте всю жидкость с резервуара для воды. Выключите прибор из сети.</p>	

Важно. Уход за ирригатором.

После использования любого специального раствора в резервуаре, найдите время после каждого использования ополоснуть ирригатор. Частично заполните резервуар теплой водой, направьте струю воды в раковину, включите устройство и дайте ему поработать до тех пор, пока резервуар не станет пустым. Это поможет насадке не забиться и поможет Вашему устройству прослужить дольше.

Очищайте продукт, когда, необходимо используя мягкую ткань и мягкое неабразивное моющее средство.

Перед очищением, пожалуйста, отключите от сети электрический прибор. Прежде чем помещать прибор в температуру замерзания, уберите резервуар и убедитесь, что прибор полностью пустой.

Мы гарантируем первоначальному покупателю/владельцу этого нового продукта, у которого нет дефектов в течении 1 года.